

TOWER!!!

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
[www.righetto .biz](http://www.righetto.biz)



È tempo di evolversi.

Con il nuovo TOWER abbiamo voluto fare l'impossibile:
offrire un dispositivo full-optional con un design compatto
ove la tecnologia è protagonista.
Approda un nuovo modo di intendere ed usare il
dispositivo elettromedicale: un'unica console comandi
alla quale puoi connettere qualsiasi generatore.

Tutti i vantaggi di essere innovativi!

7 tipi

generatori disponibili

versatilità

4,3 pollici

display a colori con soft-touches

tecnologia

0,5 kg

peso

praticità



explore all solutions...



Più innovativa
e versatile di sempre per
crescere in efficienza



TOWER TRC: oltre alle tue migliori aspettative!

Innovativa per natura, TOWER TRC offre al dispositivo per tecarterapia soluzioni d'avanguardia che consentono di ottenere il massimo da ciascun trattamento.

Potenza ampiamente regolabile sino a 120 Watt, modalità capacitiva e resistiva con selezione elettronica senza cambiamento elettrodo, manipolo Interactive Probe con Dynamic Energy Transfer in funzione della variazione di temperatura sul paziente e della sua resistenza cutanea, Magnetic Coupling System, ampia biblioteca di programmi terapeutici, memorie libere per programmi personalizzati.



Interactive Probe: la tecnologia offre nuovi traguardi

Interactive Probe

Studiato perché chiunque possa impugnare il manipolo in modo pratico e confortevole, per eseguire un massaggio efficace e sempre in pieno relax, con la massima protezione sia da eventuali correnti disperse, sia dal campo elettromagnetico erogato.



Trattamento viso con modalità bipolare

Trattamento di una ferita mediante manipolo bipolare



PRIMA



DOPO

MCS: Magnetic Coupling System

Ideato in esclusiva da PAGANI, MCS garantisce l'accoppiamento dell'elettrodo al manipolo mediante un sistema di attrazione magnetica, senza connessioni; è sufficiente avvicinare l'elettrodo al manipolo per assicurarne l'adesione.

TOWER TRC



Interactive probe



Manipolo bipolare



Valigia

TOWER CRYO-SHOCK: gioca d'anticipo!



TOWER CRYO SHOCK ti consente di "aggredire" e trattare da subito anche i traumi recenti, sui quali nella maggioranza dei casi non potresti intervenire e dovresti chiedere al paziente di farsi rivedere solo dopo 3-4 giorni, costringendolo di fatto a sopportare il dolore ed ad una lenta regressione delle conseguenze del trauma. CRYO SHOCK ti permette invece di intervenire prontamente, facendo valere la tua professionalità, per trattare il dolore e ridurre in modo tempestivo il versamento ematico, l'edema e l'infiammazione. Il paziente ottiene una regressione tempestiva del dolore ed i tempi di recupero si riducono drasticamente..

Per l'ambulatorio o per il trasporto, senza rinunciare a nulla!

Compatto, permorfante, efficace, facile da usare; non potrai più farne a meno e risponderai con professionalità e tempestività a svariate patologie e traumi, perché la terapia da shock termico è oggi efficacemente utilizzata da sola ma anche a supporto di altre terapie manuali e strumentali, come la terapia ad onde d'urto ove la successione di caldo e freddo consente di ridurre il dolore e di preservare ed incentivare l'iperemia già stimolata dalle onde d'urto; ed anche dopo una seduta di laser terapia ad alta potenza, lo shock termico può essere utile per ridurre tempestivamente il dolore e contemporaneamente conservare la biostimolazione indotta dalla luce laser.



L'approccio terapeutico che ti mancava!

TOWER CRYO-SHOCK offre al fisioterapista l'ausilio terapeutico per eccellenza, di cui nessun ambulatorio fisioterapico, piccolo o grande che sia, può fare a meno!

SORGENTE CRIOGENA sino a - 5°C

SORGENTE TERMICA sino a 41 °C

SHOCK TERMICO CONTROLLATO da - 5°C a 41°C



TOWER LIGHT: alta potenza e grande energia!

Dotato di potenza effettiva sino a 1.200 mW, emissione continua e pulsata, LIGHT consente di trattare con efficacia qualsiasi patologia, in piena sicurezza. Trattamento dei trigger points, trattamento puntuale e trattamento a scansione manuale sono tutte le possibilità che fanno di LIGHT un laser particolarmente versatile. Semplicità d'uso, maneggevolezza, sicurezza operativa insieme all'efficacia di un sistema in grado di erogare densità d'energia laser elevate in tempi relativamente brevi, sono le prerogative di LIGHT, dispositivo laser moderno e versatile.



The extraordinary performance...




Manipolo



Valigia



Protettore oculare

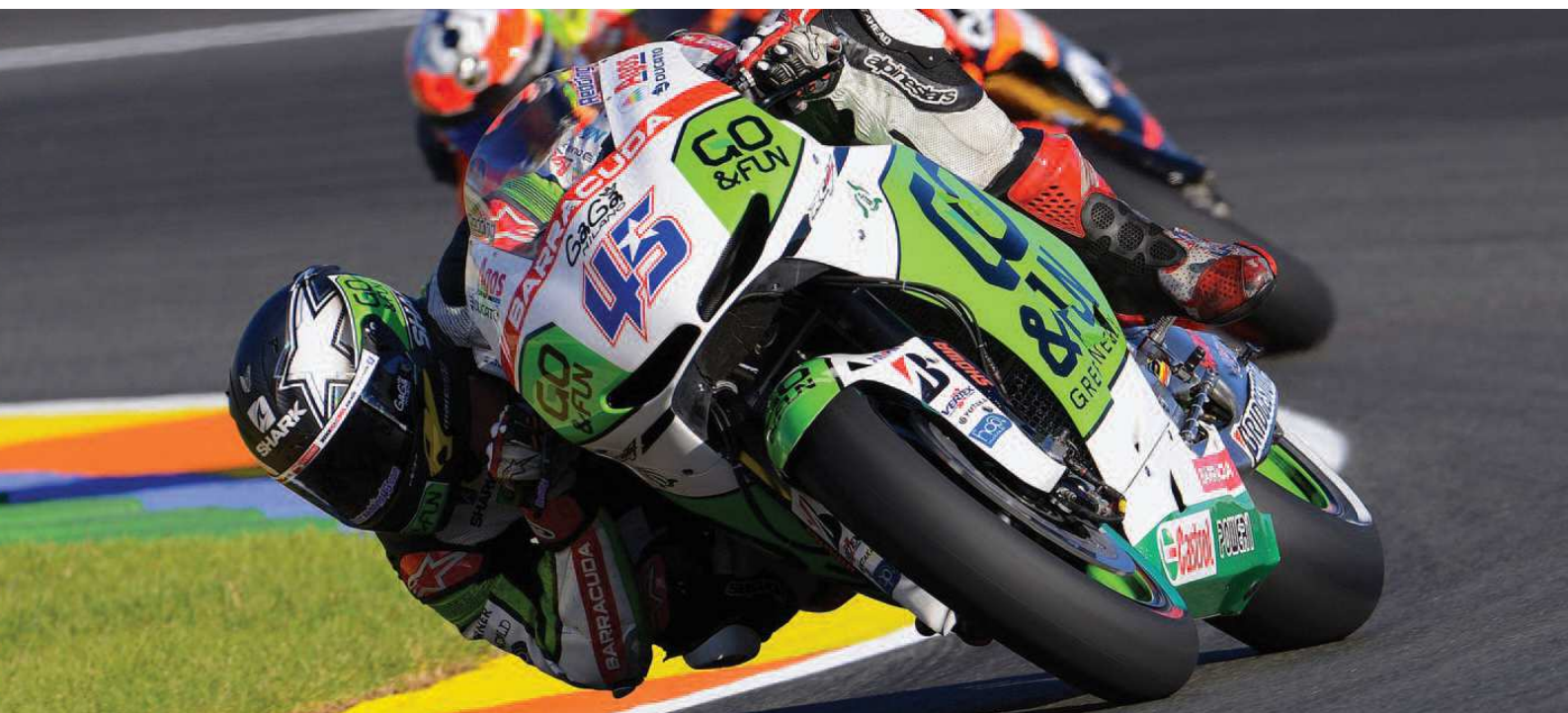

TOWER SOUND: quando il gioco si fa duro i duri entrano in gioco!

Dispositivo per ultrasuonoterapia multifrequenza, funzionamento a frequenze singole (1 o 3 MHz) e combinate (1+3 MHz) per garantire la trasmissione ottimale ai tessuti malati, TOWER SOUND è espressione delle migliori soluzioni tecnologiche adottate. E' possibile effettuare trattamenti a massaggio ed in acqua, la potenza è regolabile sino a 3W/cm².

La testina studiata per rispondere alle esigenze ergonomiche, conferisce ottimo comfort di trattamento al terapeuta, per garantirne performances ed al contempo posizioni confortevoli e tali da poter protrarre nel tempo i vari trattamenti, senza affaticamento.



Scelto dalla clinica mobile
per i piloti delle
moto gp e superbike!



Valigia



TOWER 2 STIM: elettroterapia universale

TOWER 2 STIM è in grado di erogare tutte le correnti di bassa ed i media frequenza. Le correnti vengono erogate su due canali indipendenti nella regolazione della dose, mentre l'ampia libreria di programmi terapeutici predefiniti è accompagnata da un'ampia memoria libera per programmi personalizzati.

- Ionoforesi
- Tens e Bifasica
- Diadinamiche
- Interferenziali
- Kotz
- Stimolazione dei muscoli denervati





TOWER 2 STIM

TOWER 4 STIM:

4 uscite ad alte prestazioni

TOWER 4 STIM é un moderno dispositivo per la stimolazione dei muscoli normo-innervati, la ionoforesi, la terapia del dolore, il drenaggio, il miglioramento delle performances muscolari.

■ BIFASICA ■ TENS ■ IONFORESI (GALVANICA)

L'ampia possibilità di regolazione dei parametri (modulazione, frequenze, durate d'impulso), consente a 4 STIM di effettuare ciascun trattamento con efficacia e nel maggior comfort per il paziente. E' così possibile adeguare i parametri a seconda della terapia da eseguire ed a seconda delle parti anatomiche da trattare. E' possibile meglio reclutare le fibre lente piuttosto che le fibre veloci o viceversa, é possibile eseguire dei drenaggi più o meno diffusi, determinare effetto antalgico piuttosto che eccitomotore sulle fibre normo-innervate ed infine è possibile veicolare un medicamento in forma ionica a livello locale.

5 - 12 Hz
DRENAGGIO

20 - 35 Hz
STIMOLAZIONE FIBRE LENTE

50 - 70 Hz
STIMOLAZIONE FIBRE VELOCI

80 - 120 Hz
MIGLIORAMENTO PERFORMANCE

50 - 80 us
TERAPIA DEL DOLORE

150 - 180 us
STIMOLAZIONE MUSCOLI
PICCOLE DIMENSIONI

300 - 350 us
STIMOLAZIONE MUSCOLI
GRANDI DIMENSIONI



TOWER

TOWER 4 STIM





TOWER MAG: grande efficacia, piccole dimensioni!

TOWER MAG é un generatore di campi magnetici di bassa frequenza dotato di due canali d'uscita.

I campi Magnetici Pulsanti di bassa frequenza vengono utilizzati con efficacia nel trattamento delle patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico. Accelerano il processo di guarigione, favoriscono il ripristino delle condizioni fisiologiche ottimali principalmente delle strutture ossee e cartilaginee, con efficacia e senza effetti collaterali.

TOWER MAG dispone di 2 applicatori a contatto, è in grado di erogare un campo magnetico pulsante regolabile nel range da 1 sino a 200 Hz, per un'intensità di picco pari a 100 Gauss per ciascuna uscita, e 50 Gauss efficaci sul paziente.



TOWER MAG



TRC ■ Potenza max. 120 W ■ Emissione continua e pulsata ■ Interactive Probe ■ Elettrodi 30 e 60 mm ■ Sensore di temperatura ■ Impedenza ■ Display a colori 4,3" ■ Programmi ■ Memorie libere A richiesta: ■ manipolo bipolare con elettrodo 30 mm ■ valigia	CRYO T-SHOCK ■ Temperatura del freddo regolabile sino a -5° ■ Temperatura del caldo regolabile sino a 41° ■ Visualizzazione in tempo reale delle variazioni ■ Display a colori 4,3" ■ Programmi predefiniti ■ Memorie libere A richiesta: ■ valigia	LIGHT ■ Classe Laser 4 ■ Lunghezza d'onda 808 nm ■ Potenza efficace sul paziente 1200 mW, alla sorgente 1600 mW ■ Emissione continua e pulsata e Trigger Points ■ Display 4,3" ■ Manipolo ■ Occhiali protettivi ■ Programmi ■ Memorie libere A richiesta: ■ batteria interna ■ secondo occhiale protettivo ■ valigia	SOUND 1/3 MHz ■ Frequenze 1 & 3 MHz ■ Potenza 3 W/cm² ■ Emissione continua e pulsata ■ Duty-cycle: 25, 50, 75% ■ Frequenza: 10 ÷ 200 Hz ■ Display 4,3" ■ Testina 5 cm² ■ Controllo di contatto ■ Programmi ■ Memorie libere A richiesta: ■ testina 1 MHz statica ■ batteria interna ■ valigia	2 STIM ■ Galvanica, interrotta, diadinamiche 50, 100 Hz, CP, LP, denervati, Bifasica, Tens, Interferenziale, Kotz ■ 2 uscite ■ Display 4,3" ■ Programmi ■ Memorie libere A richiesta: ■ batteria interna ■ valigia	4 STIM ■ Galvanica, interrotta, Bifasica, Tens, ■ 4 uscite a coppie indipendenti ■ Display 4,3" ■ Programmi ■ Memorie libere A richiesta: ■ batteria interna ■ valigia	MAG ■ Potenza max 50 Gauss ■ Emissione continua e modulata ■ Frequenza: da 1 a 200 Hz ■ 2 uscite ■ Display 4,3" ■ Programmi ■ Memorie libere A richiesta: ■ batteria interna ■ valigia
--	--	--	--	---	---	---





QUALITY FOR HEALTH SINCE 1947

Via De Nicola 4/D

20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy

Tel. +39.02 99043903

Fax +39.02 99045149

info@elettronicapagani.it

www.paganihealthcare.it

DISTRIBUITO DA:
RIGHETTO srl
VENEZIA
tel.0415415253
www.righetto.biz